

8 酸素吸入装置

ハイメディック専用

“ハイメディック”に選択可能なオプションです。

標準型専用

“標準型救急車”に選択可能なオプションです。

共通

“ハイメディック”、“標準型救急車”に選択可能なオプションです。

新製品

何も表示の無いオプションも“ハイメディック”、“標準型救急車”に選択可能なオプションです。
今年度、新たに設定されたオプションです。

ボンベ固定装置

このページの 注意事項

※酸素及び空気ボンベ容器は、別途購入下さい。
※酸素吸入装置は、別オプションです。 →p. 115,116
※酸素ガス、空気ガスの充填は、当該オプションに含まれておりません。

J110-SM12:酸素ボンベ アルミ 2ℓ×1本

- ・軽量のアルミ酸素ボンベ容器(2.0ℓ×1本)をハイバックシート下部に搭載する為の金具を取付ます。
 - ・減圧弁、オキシクリップ等は外して下さい。
 - ・予備ボンベ単体の搭載装置となります。
- ※画像の酸素ボンベ容器は、当該オプションに含まれておりません。
※同時選択不可オプション
- ・消火器移設 [K310-SM02]
 - ・ウルトライト2個 [K130-SM02]

J110-SY09:酸素ボンベ アルミ2ℓ×1本(前側)

J110-SY05:酸素ボンベ アルミ2ℓ×1本(後側)

- ・横向きシート下部収納庫内に、酸素ボンベ2ℓ×1本用の固定架台を取付けます。
- ・オキシクリップ、減圧弁付きでも搭載対応可能なスペースを確保しています。

J110-SY07:酸素ボンベ アルミ2ℓ×2本

- ・横向きシート下部収納庫内に、酸素ボンベ2ℓ×2本(減圧弁無し状態)用の積載架台を取付けます。

J510-SY02:空気ボンベ 8.4ℓ×1本

- ・横向きシート下部収納庫内に、空気ボンベ 8.4ℓ×1本(減圧弁付き状態)用の積載架台を取付けます。
- ※画像の空気ボンベ容器、空気ガス、減圧弁は、当該オプションに含まれておりません。

収納イメージです。

ハイメディック専用

J110-RD04:酸素ボンベ アルミ9.4ℓ×2本

- ・軽量のアルミ酸素ボンベ容器(9.4ℓ×2本)を固定する為の受け皿金具等を変更します。
- ※画像の酸素ボンベ容器は、当該オプションに含まれておりません。

ハイメディック専用

J110-RD06:酸素ボンベ 3.5ℓ兼用改造

- ・酸素ボンベ 3.5ℓ×2本の設置も兼用出来る様にします。
 - ・アタッチメント(矢印部)を取り外せば、10ℓボンベの収納も可能です。
- ※アルミ酸素ボンベも対応可能

3.5ℓボンベ積載例→

標準型専用

酸素ボンベ収納庫

J710-RD06:酸素配管 あり

J710-RD07:酸素配管 無し

- ・標準型救急車に、酸素ボンベ10ℓ×2本の固定を可能にします。
- ・付属のアタッチメント(矢印部)を使用しボンベ3.5ℓ×2本を取付ける事も可能です。

← 室内側からみた図

8
酸素
吸入
装置

8
酸素
吸入
装置

酸素吸入装置 取付

<オキシパック型>



オキシパックOX-FDX

- ・J310-HR10: ヨークバルブ仕様
- ・J310-HR12: ドイツバルブ仕様

[構成品]

- ①加湿流量計オキシパックOX-FDX本体
- ②減圧弁 2個
- ③三方チーズ
- ④配管ホース

※酸素ボンベ容器及び酸素ガスは、当該オプションに含まれません。

※標準型救急車の場合は下記オプションのいずれかの選択が必要です。

- ・酸素ボンベ収納庫 [J710-RD06]
- ・酸素ボンベ収納庫 [D110-RD81]

【ご注意】

加湿流量計及び減圧弁は医療機器です。

医療機器の販売・賃貸を行う事業者は都道府県知事の許可が必要になります。

医療用具承認番号 オキシパックOX-FDX: 20600BZZ00669000

減圧弁: 11B1X00012000020



ヨーク式バルブ



ドイツ式バルブ



オキシパックOX-1 (15L/min)

- ・J310-HR03: ヨークバルブ仕様
- ・J310-HR08: ドイツバルブ仕様

[構成品]

- ①加湿流量計オキシパックOX-1本体
- ②減圧弁 2個
- ③三方チーズ
- ④配管ホース

※酸素ボンベ容器及び酸素ガスは、当該オプションに含まれません。

※標準型救急車の場合は下記オプションのいずれかの選択が必要です。

- ・酸素ボンベ収納庫 [J710-RD06]
- ・酸素ボンベ収納庫 [D110-RD81]

【ご注意】

加湿流量計及び減圧弁は医療機器です。

医療機器の販売・賃貸を行う事業者は都道府県知事の許可が必要になります。

医療用具承認番号 オキシパックOX-1(15L): 16300BZZ01398000

減圧弁: 11B1X00012000020



ヨーク式バルブ



ドイツ式バルブ

<増設マニホールド>

※ 別途、加湿流量計と酸素ボンベ取付のオプションが必要になります。

※ 増設マニホールドは、1ヶ所までしか選択する事は出来ません。



J130-RB02: ジュンロン型 × 2口


・酸素マニホールドを加湿流量計下部のレールに取付けます。



J130-RB03: 川重型 × 2口


J130-RB09: アムコ型 × 2口

・酸素マニホールドを加湿流量計下部のレールに取付けます。

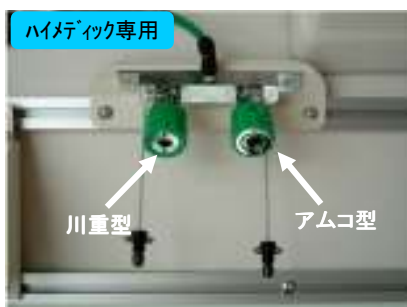

J130-RB06: 川重型 + アムコ型

・酸素マニホールドを加湿流量計下部のレールに取付けます。

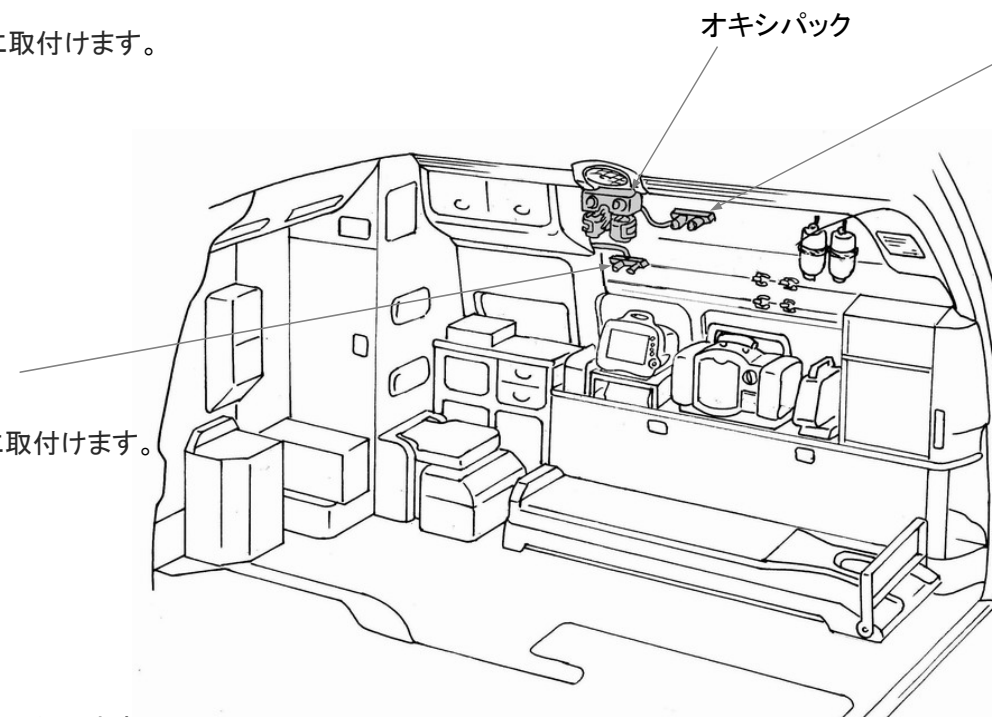

J130-HR01: 川重型 × 2口

・酸素マニホールドを右ルーフサイドに取付けます。

※同時選択不可オプション

- ・ルーフサイド収納庫・右後 [D110-HR06、79、E410-R07]
- ・酸素マスク収納トレイ [D110-HR11]



<組合せ事例>

人工呼吸器 取付①(右棚上部)

※画像中の医療機器本体は、含まれておりません。別売です。

人工呼吸器 取付②(モニター下部)

ハイメディック専用

このページの 注意事項

※人工呼吸器本体は、当該オプションに含まれません。
※電源工事は含まれません。

このページの 注意事項

※人工呼吸器本体は、当該オプションに含まれません。
※電源工事は含まれません。

H210-RB22:ANSWER

・人工呼吸器上部にはトレイを設けます(上囲い含む)。
※ANSWERはAC100Vが必要です。
[77E インバーター]を必ず選択してください。
AC100V自動切替改造[P510-RS11]とセットで選択されることを推奨いたします

※画像はイメージです。

H210-RB11:パラパック2D・200D

・人工呼吸器上部にはトレイを設けます(上囲い含む)。
※パラパック200Dは電源不要です。

H210-RB28:オキシログ3000プラス

・人工呼吸器上部にトレイは付きません。
・ACアダプタは台座内に取付けます。
・固定ベルトの掛け方は取扱説明書に従って下さい。
・酸素接続口形状によっては、増設マニホールドの選択が必要です →p113
※オキシログ3000プラスはAC100Vが必要です。
インバーター[77E:メーカーOPT]を必ず選択してください。
AC100V自動切替改造[P510-RS05]とセットで選択されることを推奨いたします。

H210-RB08:オキシログ2000

・人工呼吸器上部にはトレイを設けます(上囲い含む)。
※オキシログ2000はAC100Vが必要です。
インバーター[77E:メーカーOPT]を必ず選択してください。
AC100V自動切替改造[P510-RS05]とセットで選択されることを推奨いたします。
※オキシログ2000は販売終了しております。
当該オプションは載せ替え工事を対象にしております。

H210-RB09:メデュマツSTD／オートベント2000

・メデュマツ(STD/a)または、オートベント2000の兼用固定装置です。
・メデュマツの取付けには、別売の専用ウォールマウントWMHO [95665-A0365]が必要です。
・メデュマツ用酸素入力ホースは、長さ1.8m仕様でご用意下さい。
・人工呼吸器上部にはトレイを設けます(上囲い含む)。
※メデュマツSTD／オートベント2000は電源不要です。

H210-RB15:CAREvent(ケアベント)ATV+

・人工呼吸器上部にはトレイを設けます(上囲い含む)。
※CARE vent ATV+ は電源不要です。

H210-RB19:ANSWER(アンサー)

※ANSWERはAC100Vが必要です。
[77E インバーター]を必ず選択下さい。
※ANSWERはAC100Vが必要です。
[77E インバーター]を必ず選択して下さい。
AC100V自動切替改造[P510-RS11]とセットで選択されることを推奨いたします

H210-RB01:パラパック2D・200D

※パラパック200Dは電源不要です。

H210-RB03:メデュマツSTD／オートベント2000

・メデュマツSTDの取付けには、別売の専用ウォールマウントWMHO [95665-A0365]が必要です。
・メデュマツの酸素入力ホースは長さ1.8mをご用意下さい。
・固定台座を反転させるとオートベント2000の取付金具になります。(左下図)
※メデュマツSTD／オートベント2000は電源不要です。

H210-RB05:CAREvent(ケアベント)ATV+

※CARE vent ATV+ は電源不要です。

8
酸素吸入装置

人工呼吸器 取付③(右窓上部／酸素ボンベ収納庫上部) ※画像中の医療機器本体は、含まれておりません。別売です。

＜右窓上部＞ ※人工呼吸器本体は、当該オプションに含まれません。

H210-RK10:メデュマツ(スタンダード／スタンダードa)

・メデュマツ専用ウォールマウントWMHO別売が必要です。



←専用ウォールマウントWMHO(別売) [95665-A0365]

H210-RK23:メデュマツ・イージー

・メデュマツ・イージーを右窓上レール部に取付けます。
・メデュマツ・イージーに付属のブラケットで固定します。

※別売専用着脱金具[95665-A0452]を追加すると着脱容易になります。 →p. 165

＜酸素ボンベ収納庫上部＞

※酸素ボンベ収納庫上レール[E110-RD01]の選択が必要です。

※電源工事は含まれておりません。

※画像の人工呼吸器は、当該オプションに含まれません。

※画像はイメージです。

H210-RD20:ANSWER

・人工呼吸器上部にはトレイを設けます(上囲い含む)。
※ANSWERはAC100Vが必要です。
インバーター[77E:メーカーオプション]を必ず選択してください。
AC100V自動切替改造[P510-RS11]とセットで選択されることを推奨いたします。

H210-RD16:オキシログ2000プラス

H210-RD27:オキシログ3000プラス

・人工呼吸器上部にトレイは付きません。
・ACアダプタは台座内に取付けます。
・固定ベルトの掛け方は取扱説明書に従って下さい。
・酸素接続口形状によっては、増設マニホールドの選択が必要です →p115

※オキシログ2000、3000プラスはAC100Vが必要です。
インバーター[70E:メーカーオプション]を必ず選択してください。
AC100V自動切替改造[P510-RS11]とセットで選択されることを推奨いたします。

※画像はオキシログ3000プラスです。

H210-RD06:オキシログ2000

・呼吸器上部はトレイを設けます(上囲い含む)。

※オキシログ2000はAC100Vが必要です。
インバーター[77E:メーカーオプション]を必ず選択してください。
AC100V自動切替改造[P510-RS11]とセットで選択されることを推奨いたします。

※上囲い無し(人工呼吸器上部のトレイ無し)仕様は[H210-RD17]。

※オキシログ2000は販売終了しております。
当該オプションは載せ替え工事を対象にしております。

人工呼吸器 取付④(除細動下部)

ハイメディック専用

※人工呼吸器、及び除細動器本体は、当該オプションに含まれません。

F110-RB17:パラパック200D+MRx

・除細動器MRxと下部に人工呼吸器パラパックを二段セットで設置します。
・蛇管収納庫付きです。

※MRx標準付属品のバックパックは使用出来ません。

※MRx用オプションのワイドベッドレールフックは使用出来ません。



蛇管収納庫

F110-RB21:ANSWER +MRx

・除細動器MRxと下部に人工呼吸器ANSWERを二段セットで設置します。

・蛇管収納庫付きです。

※MRx標準付属品のバックパックは使用出来ません。

※MRx用オプションのワイドベッドレールフックは使用出来ません。



蛇管収納庫

F110-RB20:パラパック200D+ライフパック12B

・除細動器ライフパック12Bと下部に人工呼吸器パラパックを二段セットで設置します。

・蛇管収納庫付きです。

※ライフパック12Bは販売終了しております。



蛇管収納庫

F110-RB28:ANSWER+ライフパック15

・除細動器ライフパック15と下部に人工呼吸器ANSWERを二段セットで設置します。

・蛇管収納庫付きです。



蛇管収納庫

＜組合せ事例＞

